

3R SYSTEMS CO., LTD.

# ユーザーマニュアル

---

## UM-CAM インストールマニュアル

2010/02/10 Update Ver.2.1A

# UM-CAM インストールマニュアル

## 目次

1.	付属の CD-ROM を CD ドライブに挿入する .....	3
2.	UM-CAM ソフトウェアのインストール .....	4
2.1	ソフトウェアのインストールを開始する .....	4
2.2	インストール先の指定 .....	5
2.3	インストールプロセス .....	5
2.4	インストールの完了 .....	6
2.5	インストールが完了したら .....	6
3.	UM-CAM USB ドライバのインストール .....	7
3.1	ドライバのインストールを開始する .....	7
3.2	インストールプロセス .....	8
3.3	インストールの完了 .....	8
3.4	インストールが完了したら .....	9
4.	UM-CAM ソフトウェアのアンインストール .....	10
4.1	アンインストールプログラムの起動 .....	10
4.2	アンインストールの最終確認 .....	10
4.3	アンインストールプロセス .....	10
4.4	アンインストールの完了 .....	11
5.	UM-CAM USB ドライバのアンインストール .....	12
5.1	アンインストールプログラムの起動 .....	12
5.2	アンインストールの最終確認 .....	12
5.3	アンインストールプロセス .....	12
5.4	アンインストールの完了 .....	13

UM-CAM のインストールは3つのステップに分かれています。以下の3つのステップを完了することで UM-CAM を使用することが出来るようになります。

- Step 1. 付属の CD-ROM を CD ドライブに挿入する。
- Step 2. UM-CAM ソフトウェアのインストール
- Step 3. UM-CAM USB ドライバのインストール

UM-CAM をアンインストールするには以下の2つのステップを完了する必要があります。

- Step 1. UM-CAM ソフトウェアのアンインストール
- Step 2. UM-CAM USB ドライバのアンインストール

## 1. 付属の CD-ROM を CD ドライブに挿入する

本製品に付属する CD-ROM をパソコンの CD ドライブに挿入すると、自動的に図 1-1 のようなメニュー画面が表示されます。



図 1-1：メニュー画面

付属の CD-ROM を CD ドライブに挿入してもメニュー画面が出てこない場合には、マイコンピュータより CD ドライブを開き、中にある Autorun.exe (図 1-2) をダブルクリックすることでメニュー画面を表示することも可能です。



図 1-2：Autorun.exe

## 2. UM-CAM ソフトウェアのインストール

前述のメニュー画面(図 1-1)より UM-CAM アプリケーションインストールを選択すると、UM-CAM ソフトウェアのインストールが始まります。

### 2.1 ソフトウェアのインストールを開始する

始めに言語の選択画面(図 2-1)が表示され、「Japanese」を選択すると下図 2-2 のインストールの開始画面が表示されますので、「次へ」をクリックして先に進みます。



図 2-1 言語の選択



図 2-2 インストール開始画面

## 2.2 インストール先の指定

次に、下図 2-3 のインストール先の指定画面が表示されたら、場所の指定が特に必要ない場合には「インストール」をクリックして先に進んで下さい。インストール先のフォルダを変更する際は「参照」をクリックしてフォルダを選択して下さい。



図 2-3 インストール先の指定

## 2.3 インストールプロセス

インストールが開始されると、下図 2-4 のインストールのプロセスが表示されますので完了するまでしばらくお待ち下さい。



図 2-4 インストールのプロセス

## 2.4 インストールの完了

インストールが完了すると下図2-5の画面が表示されますので、「完了」をクリックしてインストールを終了して下さい。



図 2-5 インストールの完了

## 2.5 インストールが完了したら

デスクトップに下図 2-6 の UM-CAM へのショートカットが作成されます。



図 2-6 UM-CAM へのショートカット

また、プログラムメニューに下図 2-7 の UM-CAM の項目が追加されます。



図 2-7 プログラムメニュー

### 3. UM-CAM USB ドライバのインストール

前述のメニュー画面(図 1-1)より UM-CAM 駆動プログラムのインストールを選択すると、UM-CAM USB ドライバのインストールが始まります。

**注意：**ドライバをインストールする前に必ず UM02 本体とパソコンを付属の USB ケーブルで接続して下さい。接続されていない状態ではドライバのインストールができません。

#### 3.1 ドライバのインストールを開始する

前述のメニュー画面(図 1-1)より UM-CAM 駆動プログラムのインストールを選択すると、UM-CAM USB ドライバのインストールが始まり、下図 3-2 のインストールの開始画面が表示されます。但し、UM02 とパソコンが接続されていない状態でインストールを開始した場合には、下図 3-1 のエラーが表示されますので、接続してから再度インストールを開始して下さい。



図 3-1 UM02 未接続のエラー表示

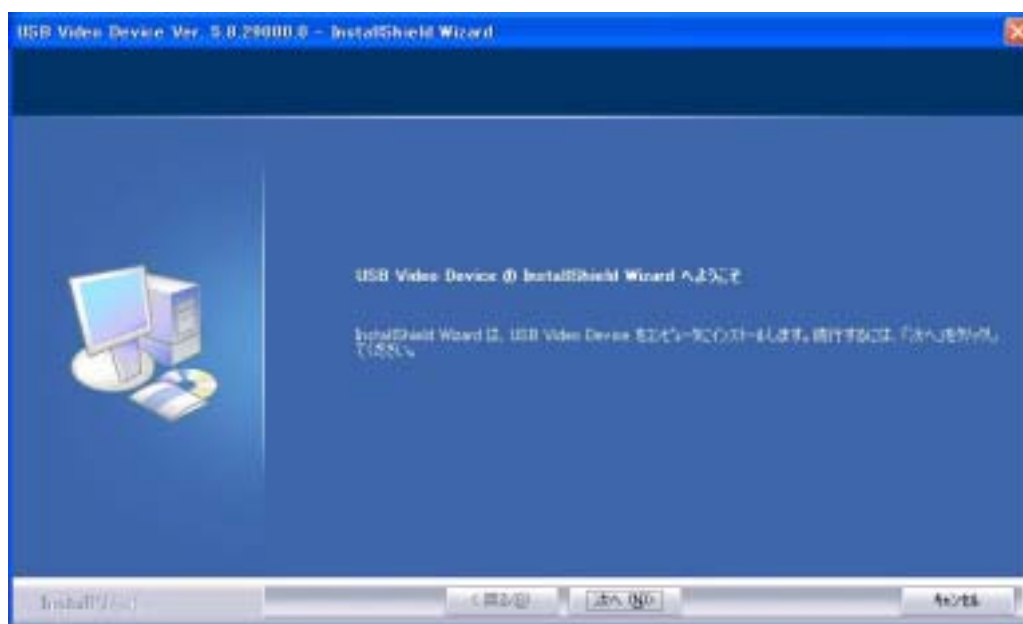


図 3-2 インストールの開始画面

## 3.2 インストールプロセス

インストールが開始されると、下図 3-3 のインストールのプロセスが表示されますので完了するまでしばらくお待ち下さい。



図 3-3 インストールのプロセス

## 3.3 インストールの完了

インストールが完了すると下図 3-4 の画面が表示されますので、「完了」をクリックしてインストールを終了して下さい。

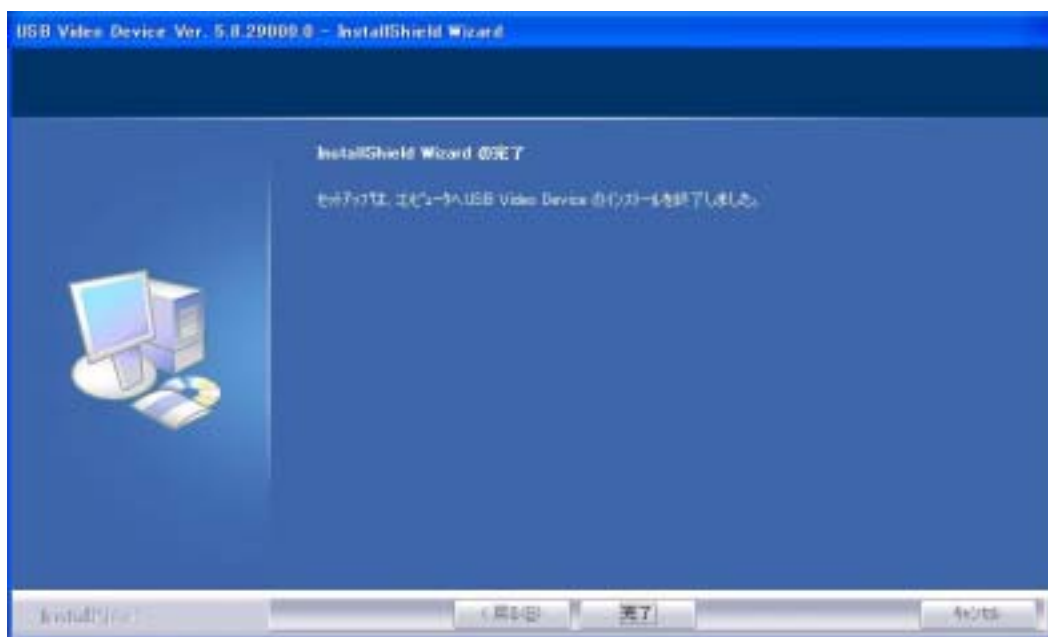


図 3-4 インストールの完了



### 3.4 インストールが完了したら

インストールが完了したらタスクバーに図 3-5 で示すようなビデオカメラのアイコンが表示されます。



図 3-5 タスクバーの表示

また、プログラムメニューに下図 3-6 の USB Video Device の項目が追加されます。



図 3-6 プログラムメニュー

## 4. UM-CAM ソフトウェアのアンインストール

### 4.1 アンインストールプログラムの起動

ソフトウェアをアンインストールするには、下図 4-1 のようにプログラムメニューから UM-CAM の項目を選択し、中にある「Uninstall」をクリックします。



図 4-1 プログラムメニュー

### 4.2 アンインストールの最終確認

アンインストールを開始する前に、本当に削除するかどうかの最終確認(図 4-2)が表示されますので、削除する場合は「はい」をクリックして下さい。



図 4-2 アンインストールの最終確認

### 4.3 アンインストールプロセス

アンインストールが始まると下図 4-3 のアンインストールのプロセスが表示されますので完了するまでしばらくお待ち下さい。

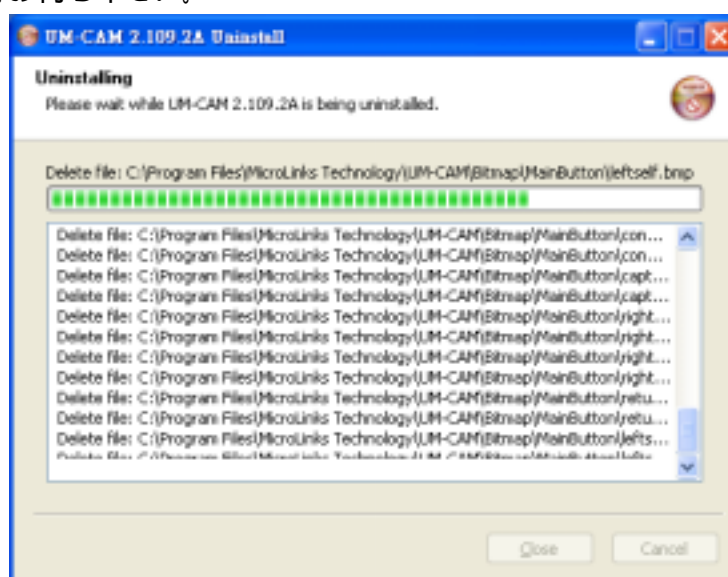


図 4-3 アンインストールのプロセス

## 4.4 アンインストールの完了

アンインストールが完了したら下図 4-4 のメッセージが表示されますので、「OK」をクリックして終了です。

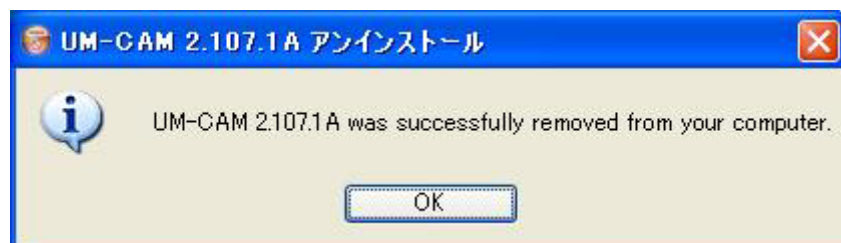


図 4-4 アンインストールの完了

## 5. UM-CAM USB ドライバのアンインストール

### 5.1 アンインストールプログラムの起動

ソフトウェアをアンインストールするには、下図 5-1 のようにプログラムメニューから USB Video Device の項目を選択し、中にある「Uninstall」をクリックします。



図 5-1 プログラムメニュー

### 5.2 アンインストールの最終確認

アンインストールを開始する前に、本当に削除するかどうかの最終確認(図 5-2)が表示されますので、削除する場合は「はい」をクリックして下さい。

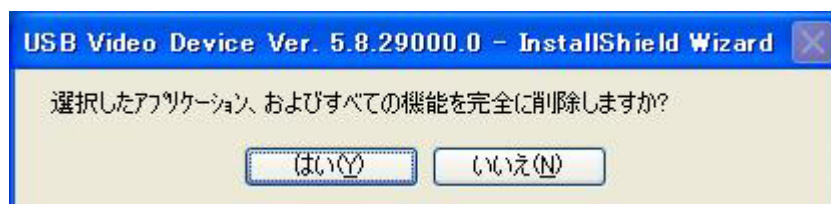


図 5-2 アンインストールの最終確認

### 5.3 アンインストールプロセス

アンインストールが始まると下図 5-3 のアンインストールのプロセスが表示されますので完了するまでしばらくお待ち下さい。

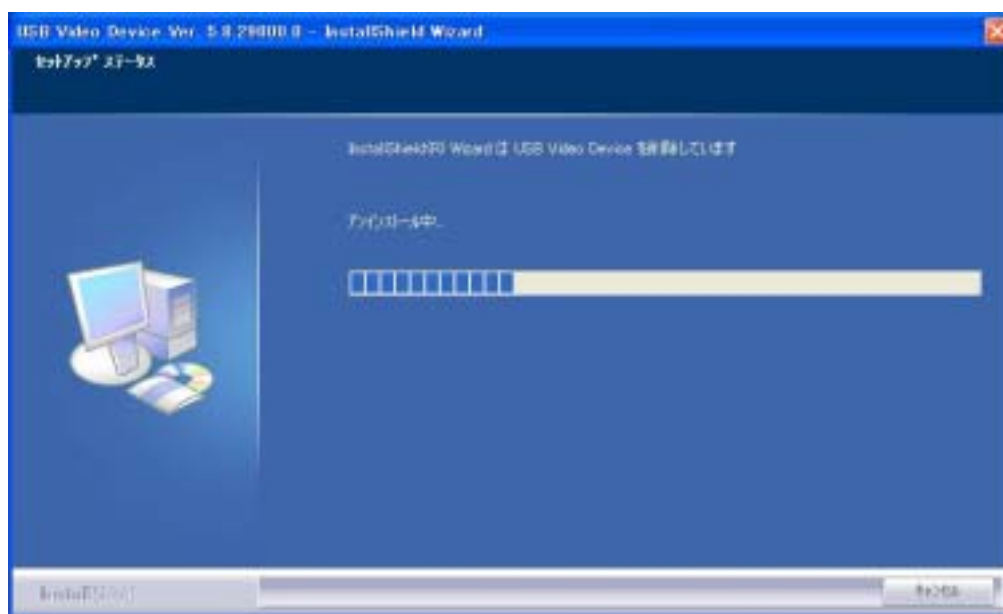


図 5-3 アンインストールのプロセス

## 5.4 アンインストールの完了

アンインストールが完了したら下図 5-4 のメッセージが表示されますので、今すぐ再起動をしてもよろしければ「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」を選択した状態で「完了」をクリックするとパソコンが再起動してアンインストールは終了です。



図 5-4 アンインストールの完了