



顕微鏡を覗く必要なし

高精細500万画素の映像をワイヤレスでチェック

WiFi接続式デジタル顕微鏡アダプタ





500万画素
CMOSセンサー

動画・静止画
撮影可能

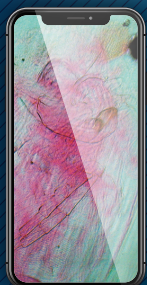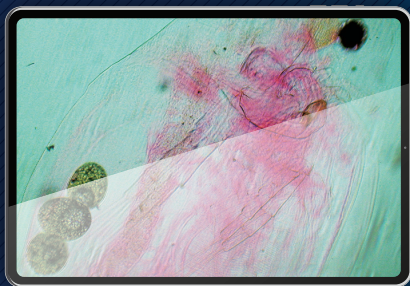

もう顕微鏡の小さな接眼レンズを覗き込む必要はありません!顕微鏡にセットすればWifi接続で離れた場所のPCやタブレットなどに高精細な映像を大きな画面で表示することができます。最大10台同時接続が可能で、複数人での観察に役立ちます。

使用事例

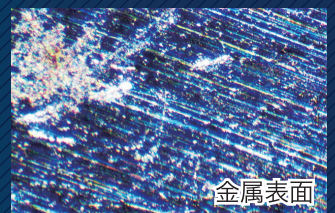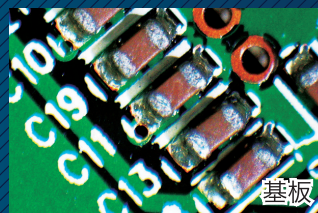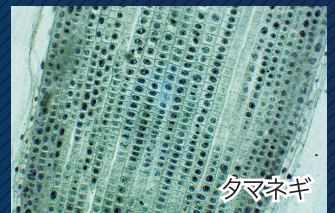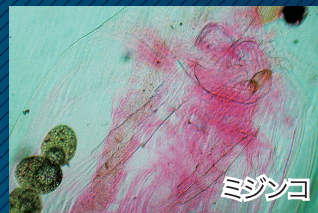


製品特長




顕微鏡で見ている映像をワイヤレスでパソコンやスマートフォン、タブレットに表示

顕微鏡にこのWiFi接続式顕微鏡アダプタを接続するだけで、顕微鏡が映している映像を顕微鏡のレンズを覗き込むことなく、スマートフォンやタブレット・無線機能付きのパソコンで大きく見ることができるようになります。

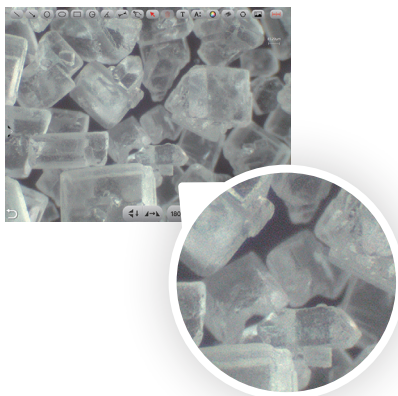

最新CMOS1/2.5型を搭載シリーズ史上最高画質500万画素で映像化します

最新のCMOSセンサーを搭載し500万画素で映像化。従来品を圧倒する高画質です。さらにフルHDより2.5倍大きい最大2592×1944ピクセルで静止画を、動画は最大1920×1080(フルHD)ピクセルで記録できます。

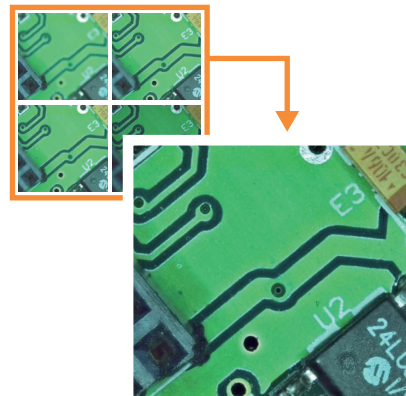

新機能「深度合成・画像合併機能」搭載 広範囲でピントが合った画像を作成

ピントが異なる複数枚の画像を合成し、1枚の画像として作成することができます。また、観察範囲で収まりきらない対象物の撮影に、2枚以上の画像を結合できる画像合併機能など便利な機能が多数搭載しています。

製品仕様／ソフトウェア要件

カメラ	1/2.5型 CMOS
カメラ解像度 (約)	500万画素
静止画フォーマット / 解像度	JPEG/BMP/PNG/TIFF/PDF 2592×1944/1920×1080/1280×960/1280×720/1024×768/640×480
動画フォーマット / 解像度	AVI (30fps) 1920×1080/1280×960/1280×720/1024×768/640×480
光源	なし。環境光による
ホワイトバランス	自動/手動
露出	自動/手動
接続方式	USB2.0 準拠 (USB-A)、WiFi
マウント	Cマウント
電源方式	USB接続時：USB-A DC5V/500mA (※PCより給電) WiFi接続時：USB-A DC5V/1,500mA
無線規格	IEEE 802.11n (2.4GHz)：2.400～2.4835GHz IEEE 802.11n/ac (5GHz) 5.180～5.825GHz ※接続には「IEEE802.11ac」を使用。
ケーブル長 (約)	1.7m
動作温度 / 湿度	0～40℃/30～80%RH
保管温度 / 湿度	-20～60℃/10～60%RH
寸法 (約)	Φ63×162mm ※アンテナを立てた状態
重量 (約)	226g (※0.5倍レンズ、各アタッチメント含まず)



- ・顕微鏡アダプタ本体
- ・φ30.5mm アタッチメント
- ・φ30mm アタッチメント
- ・φ23.2mm 0.5倍レンズ
- ・AC/USB変換アダプタ
- ・ソフトウェアCD
- ・取扱説明書兼保証書

Windows	
対応 OS	Windows10/8.1/(32bit/64bit)※
CPU	第2世代 Intel core プロセッサ 3.0Ghz 相当以上
光学ドライブ	付属 CD よりインストールのために推奨 (HPよりDLも可)
メモリ	4GB以上
保存領域	10GB以上の連続した空き領域
表示領域	XGA(1024×768) 以上
グラフィック機能	24bitカラー以上
WiFi	IEEE802.11n/ac WiFi 接続利用の場合 ※接続には「IEEE802.11ac」を使用。 ※32bitでは「深度合成」「画像合併」を行えません。

Android	
バージョン	Android5.0以降
CPU	dual-core 1.7GHz 相当以上
メモリ	1GB以上
保存領域	8GB以上
WiFi	IEEE802.11n/ac ※接続には「IEEE802.11ac」を使用。

iOS/iPadOS	
バージョン	iOS/iPadOS 11.0 以降
CPU	iPhone X/8/8 Plus/7/7 Plus/6s/6s Plus/6/6 Plus/iPad Pro (12.9-inch 2nd generation)/ (12.9-inch 1st generation) / (10.5-inch) / (9.7-inch) /iPad Air 2/iPad mini 4

※仕様・外観などは改善のため予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

製品の詳しい説明はこちら


<https://3rrr-btob.jp/archives/items/3r-wdkmc05>

※読み取り機能が付いていない携帯電話をお持ちの方、パソコンをご使用の方は上記URLを入力してください。

WEBで
詳しく見る



販売店

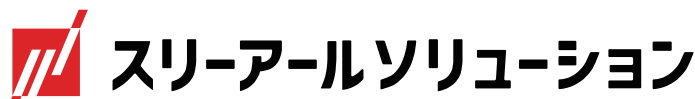

スリーアールソリューション

スリーアールソリューション株式会社
メールでのお問い合わせ：info@3rrr-hd.jp

【福岡本社】〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30 高光第一ビル2階 TEL：092-260-3030 FAX：092-441-4077
【東京支店】〒110-0015 東京都台東区東上野 3-35-9 本池田ビル4階 TEL：03-5826-4661 FAX：03-5826-4662

会社情報はこちら



<https://3rrr-btob.jp>